

モザイク

MOSAIC

完成用部品認定の各パーツの組み合わせで、デザインカスタマイズが思いのままに。
自分だけの座位保持装置が作れます。

主な特徴

- 1 用途に合ったパーツを選んで製作する、カスタム可能な座位保持装置です。
- 2 豊富なパーツラインナップで、様々な用途や身体機能に対応します。
- 3 お子様の成長に合わせて、各部の調節ができます。
- 4 自社工場で組み立て、短納期でお届けします。

寸法表

サイズ	座幅	適応身長
S	320mm	85cm～120cm
M	360mm	95cm～130cm
L	400mm	110cm～150cm
LL	440mm	130cm～160cm

スリング屋外タイプ
オプション装着品

バックサポートカバー（高通気・吸水速乾）



MOSAICフレームカラー色見本（標準1色オーダーカラー8色）

■標準色

■オーダーカラー



組み合わせ例

各パーツの自由な組み合わせで、様々な用途や身体機能に対応します。

屋内タイプ

4輪トータルロック付き
旋回キャスターで
小回りが利きます。



フレーム重量17kg (Lサイズ)

屋外タイプ

移動距離の多い施設や
学校・屋外での
使用に適しています。



フレーム重量21kg (Lサイズ)

電動タイプ

最適な姿勢を
維持した状態での
電動走行が可能です。



JWG-1 16インチ (YAMAHA)

昇降タイプ

ご利用場面に応じて高さの
調節が可能です。



「ベビーロコ（今仙）」への取付例

High-Low (R82) フレーム
に取り付けて使用します。

MOSAIC「ベビーロコ（今仙）」搭載キット

- 1 ご自分の座位保持でベビーロコが操作出来ます。
- 2 専用のパーツで各種コントローラーが使えます。
- 3 コントローラーの位置が任意で設定出来ます。



コントローラー取付テーブル

MOSAIC搭載パーツ



「ベビーロコ（今仙）」に組付けた状態

*MOSAIC昇降フレームはSサイズ・Mサイズ限定の対応となります。

パーツラインナップ

Parts

上部フレーム

スリングタイプ

AR-06SB15-01
AR-06SB16-01

スリングタイプ専用フレームで、体幹形状に合わせた立体的な調節を可能にします。背座間角度、座面奥行き調節が可能です。

主な特徴

3D調節式バックサポート

- ※スリングタイプのみ
- ① 胸部支持ベルト
- ② 下部胸部支持ベルト
- ③ ヒップ支持ベルト



※完成用部品認定

モールドタイプ

AR-06SB15-02
AR-06SB16-02

モールドタイプ専用フレームで、変形が大きく、体幹の保持が困難な場合に適しています。背座間角度、座面奥行き調節が可能です。

主な特徴

ティルト機能

- ※スリングタイプ、モールドタイプ共通
- 無段階で前傾0°から後傾30°まで動かすことができます。



※完成用部品認定

下部フレーム

屋内タイプ

AR-06FR25-01

4輪トータルロック付旋回キャスター採用フレームで、小回りが利きます。



※完成用部品認定

屋内ショートタイプ

AR-06FR25-02

屋内タイプの全長を短くしたタイプです。移動性と収納性に優れています。標準タイプより100mm程短くなっています。



※完成用部品認定

屋外タイプ

前輪5インチキャスター、後輪16インチタイヤ採用フレームで、施設や学校での使用に適しています。



屋外ショートタイプ

屋外タイプの全長を短くしたタイプです。移動性と収納性に優れています。標準タイプより100mm程短くなっています。



ヘッドフレーム

スリングタイプ

スリングタイプ専用フレームで、支持部の高さ、前後、角度の調節が可能です。



モールドタイプ

モールドタイプ専用フレームで、支持部の高さ、前後、角度の調節が可能です。




アームサポート

角度調節跳ね上げタイプ

AR-06OT31-02


パッドの角度調節、跳ね上げ、高さ調節が可能です。

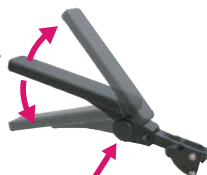

※完成用部品認定

跳ね上げタイプ

跳ね上げ、高さ調節が可能です。初期角度を任意に設定できるAタイプと、3段階に設定できるBタイプがあります。

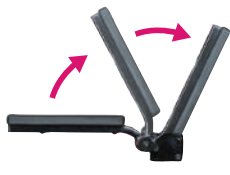

レッグ・フットサポート


L字タイプ

下腿部と足部を保持します。フットサポートの跳ね上げ、高さ調節が可能です。



エレベータータイプ

膝関節や足関節に可動制限がある場合に、角度を調節して、適正な角度で支持します。フットサポートの角度調節が可能です。

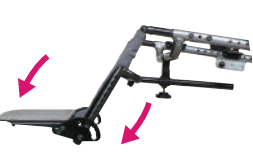


オプション

Option

NEWオプション

- 1 前方(側方)・後方どちら側からでもブレーキペダルが操作できます。
- 2 介助ブレーキが標準装備されています。
- 3 泥除けの併設も可能です。

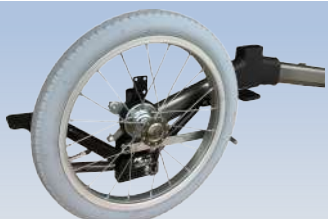

解除状態



ロック状態



泥除け取付け時

F・Rブレーキ

※FR ブレーキ専用の車輪になります。



日除け

フレーム全体を覆える大型の日除けです。後方にのぞき窓が付いています。



日除け(サマーシールドタイプ)

素材にサマーシールド®を使用し、遮熱・遮光・耐水及びUVカットに対応した日除けです。



ヘッドサポート

チップウレタンベースに体表部には肌触りの良い吸汗速乾素材を使用しています。



肩ベルト

クッション性・通気性に優れたフュージョンで作られた肩ベルトです。体を優しくホールドします。



胸ベルト(上) 骨盤ベルト(下)

表面に吸汗速乾素材・体表部にフュージョンを使用した、ベルトです。




足台クッション

20mmのチップウレタンで出来た足台クッションです。表面のカバーは取外して洗えます。



座板

表面をクイックロン(面ファスナーメッシュ生地)で覆った座板です。(背板もオーダーで製作可能です)

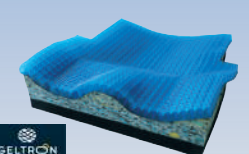

シートクッション(完成用部品認定)

詳細は下記にてご確認ください。※ジェルロンは(株)パシフィックウエーブの登録商標です。



ハイバックフレーム

背フレームを頭部まで延長します。650mm700mm(S・Mサイズ)750mm800mm(L・LLサイズ)から選択します。



リクライニング機構

背フレームの角度調節をします。背・座角90°～120°が基本設定になります。



横張型スリング

40～60mm巾の横ベルトと200mm(Sサイズは160mm)の縦ベルトで構成した張り調整ベルトです。



アームサポート延長金具

厚めの背もたれをご使用される際にアームサポートを、前方へ調整する部品です。50mmと100mmがあります。




ノーパンク車輪

ハイポリマータイプのノーパンクタイヤです。空気圧調整等のメンテナンスが不要です。



泥除け

アルミフレームの泥除けです。手や衣服のタイヤとの接触を防ぎます。

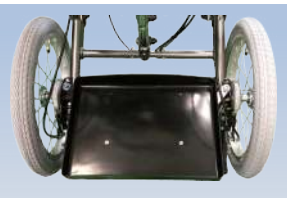

吸引器搭載台

プラスチック製の搭載台で耐荷重は10kgです。搭載部の寸法は320mm×220mm×35mm(内寸)です。



転倒防止装置


屋外フレーム用の転倒防止装置です。本体に差し込んでサイドのピンで固定します。

シートクッション

セット内容(豊富なパーツで座面形状を自由にカスタマイズできます)

※完成用部品認定
AR-06SP16-01

- 1 ご使用者様の状態に合わせて、座面形状をカスタマイズできます。
- 2 立体格子型ジェル素材「ジェルロン」を採用。優れた圧分散と通気性を発揮します。
- 3 高機能素材カバーが、汗をすばやく吸収し、拡散・乾燥させます。

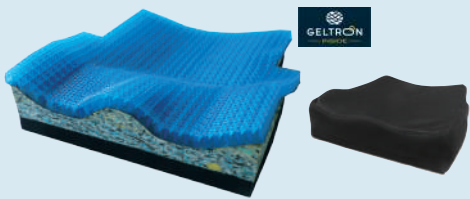

姿勢保持
パーツ

- ・内転防止パーツ
- ・外転防止パーツ
- ・アンカーパーツ
- ・骨盤パーツ
- ・アンカー延長パーツ
- ・内転防止延長パーツ

素材／	●本体	
	:ジェルロン	20mm
	:チップウレタン	各種
	:合板	9mm
	●カバー	
	:ポリエステル・ナイロン	
カラー／	ブラック(カバー)	
サイズ／	S (W31×33×5～8cm)	
	M (W35×37×5～8cm)	
	L (W39×40×5～8cm)	
	LL (W43×44×5～8cm)	

シーティングシステム

e-MOSAIC

幼児期からの電動シーティングシステム

主な特徴

- 1 MOSAICの電動走行タイプで行動範囲が広がります。
- 2 豊富なパーツラインナップで、最適な姿勢を保持します。
- 3 成長に合わせて各部の調節が可能です。
- 4 姿勢を安定させるための専用支持部があります。
- 5 JWG-1 16インチ (YAMAHA) が標準装備されています。

※ご利用にあたっては、操作能力、使用環境を考慮し、専門の医療機関にご相談ください。
※ティルトした状態での走行はしないでください。



前腕サポート
角度調節部品
AR-06OT31-03

水平・垂直方向の角度調節がワンタッチでできます。



操作部の組み立て例

前腕を支持して、電動ユニットの操作を補助します。



電動ユニット (16インチ) ※全幅が約60mm広がります。

JWG-1 16インチ (YAMAHA)
駆動輪×2、専用充電器×1、自走用操作部×1、専用バッテリー×1

オプション装着品

オプション Option



上肢保持ベルトセット



非常停止スイッチ



コントローラー接続金具



上腕パッドハードタイプ



上腕パッドソフトタイプ

※ジェルロンは(株)バンフィックウェアの登録商標です。



泥除け



吸引器搭載台





テーブル取付金具 (片持ち)

320mm×220mm×35mm (内寸)

シーティングパーツ

シーティングシステムのオリジナルパーツで様々なフレームに取り付けることができます。

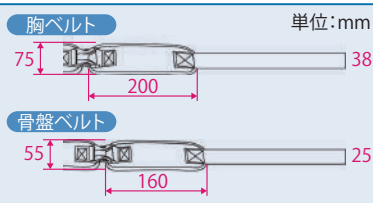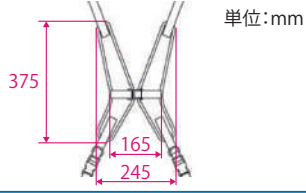品名	説明	色	サイズ・寸法				
角度調節部品 AR-06OT31-02 オプション装着品 (ウレタンアームサポートパッド)	角度調節、跳ね上げ、高さの調節が可能です。 オプションにウレタンアームサポートパッドがあります。 ※完成用部品認定	黒	—				
ウレタンアームサポートパッド	ウレタン製のアームサポートパッドです。角度調節部品に取り付け可能です。	黒	250mm × 20mm × 45mm (M6のボルトで固定します。)				
アームサポート 跳ね上げBタイプ	跳ね上げ、高さ調節が可能です。初期角度を3°、-9.5°、-22°の3段階で設定できます。	黒	—				
胸ベルト 骨盤ベルト	通気性とクッション性に優れたパッドで、体幹の前傾や骨盤の前ずれを防止します。 アジャスターで、ベルトの長さを調整できます。	黒					
肩ベルト	体幹の前傾や屈曲を防止します。 パッド部分に、高通気の3Dメッシュを使用しています。アジャスターで、ベルトの長さを調整できます。	黒					
体幹パッド 骨盤パッド	体幹や骨盤を保持して横ずれを防止します。	黒	<table border="1"><thead><tr><th>体幹パッド</th><th>骨盤パッド</th></tr></thead><tbody><tr><td>パッド高さ: 160mm パッド幅: 100mm 最大厚み: 80mm</td><td>パッド高さ: 80mm パッド幅: 100mm 最大厚み: 45mm</td></tr></tbody></table>	体幹パッド	骨盤パッド	パッド高さ: 160mm パッド幅: 100mm 最大厚み: 80mm	パッド高さ: 80mm パッド幅: 100mm 最大厚み: 45mm
体幹パッド	骨盤パッド						
パッド高さ: 160mm パッド幅: 100mm 最大厚み: 80mm	パッド高さ: 80mm パッド幅: 100mm 最大厚み: 45mm						
バギー用日よけ	強い日差しから守ります。オプションに専用取り付け金具があります。	黒	—				
日除け(深型サマーシールドタイプ)	標準タイプより更に、深いチルトにも対応したタイプです。 素材にサマーシールド®を使用し遮熱・遮光・耐水及びUVカットに対応した日除けです。	黒	—				
前腕サポート 角度調節部品 AR-06OT31-03	水平・垂直方向の角度調節がワンタッチでできます。オプションに、上腕パッド、上肢保持ベルト、コントローラー接続金具があります。 ※完成用部品認定	黒	S: 305mm × 120mm × 80mm L: 340mm × 120mm × 80mm				