

## クッション

ムアツ 車いす用クッション

# + MuAtsu™

床ずれ防止のマットレスとして開発され、健康に向き合い続けてきたムアツ。その床ずれ防止のテクノロジーを応用し、折りたたみ機能を付加した車いす用軽量クッションです。

ムアツの特殊構造のクッションは座圧を分散、血流を妨げにくく、通気性にも優れ、長時間の利用でも快適にご使用いただけます。


**超軽量**  
重量  
**350g**

### 幅広い対応力

後方のアーチ形状が全長41cmで座奥までしっかりと支持し、様々な車いすに対応します。



クッションをつけたまま車いすを折りたたむことができます。

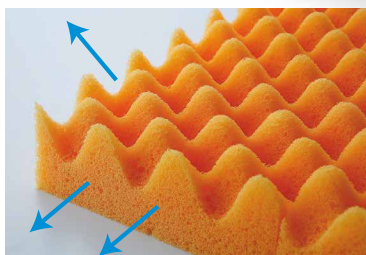

### 無膜ウレタン使用

無膜ウレタンを使用し通気性に優れた蒸れにくい構造です

### ポリジン加工

側地（カバー）にはニオイの元となるバクテリアの繁殖を抑えるポリジン加工を施しています。



**POLYGIENE**  
FRESHNESS

**MuAtsu クッション NX2** 00175-000416

税込価格 **13,860円** (本体価格 12,600円)

サイズ：厚6×幅37×奥（最長部）41cm

重量：350g（側地含む）

側地（カバー）：ポリエステル100%（ポリジン加工）

詰めもの：ウレタンフォーム




**SHOWA  
NISHIKAWA**

企画・開発 昭和西川株式会社

## ムアツの特長

### 1 独自の凹凸構造で身体を点で支える

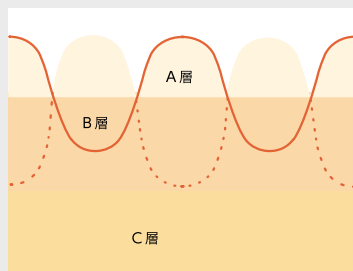

A層 身体の重さを「点」の状態を支えます。

B層 凹凸の谷の部分が隙間をつくり、空気の流れを保ちます。

C層 身体全体のバランスをよく受け止め、体圧を分散します。

### 2 身体との接触面積が少なくなり、血行を妨げにくい

—— 体圧テスターによる接触面の比較 ——



一般的な固綿敷きふとん  
白い部分に圧力が集中




点で支え、圧力を分散。

### 3 凹凸構造が受け止めた座圧をバランスよく分散


—— 座圧分布の比較 ——

最大圧力 110mmHg

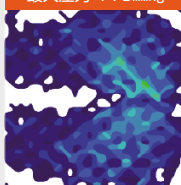

ムアツEHM35  
（柔らかい）女性  
スケール0～200mmHg

最大圧力 179mmHg

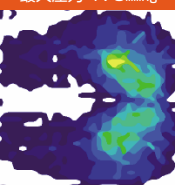

クッション  
標準クッション 女性  
スケール0～200mmHg